

# Oxford Universal Bond

Oxford Enlace universal es un enlace muy versátil y adecuado para todas las técnicas de unión, que se utilizan hoy en día en consultorios dentales de todo el mundo.

- ◆ Autograbado
- ◆ Grabado selectivo de esmalte
- ◆ Técnicas de grabado total (grabado y aumento)
- ◆ Dentina seca
- ◆ Dentina húmeda



Oxford Universal Bond puede usarse no solo para compuestos fotopolimerizables, sino también para composites de autocurado o curado dual, cuando el adhesivo puede fotopolimerizarse.

-Oxford Universal Bond contiene MDP.

-El MDP no solo es conocido por sus propiedades de autograbado, sino también por su capacidad de unirse químicamente a las superficies de los óxidos metálicos como el óxido de circonia, el óxido de aluminio y los metales. Por lo tanto, Oxford Universal Bond también se puede usar para unir materiales restaurativos indirectos, excepto la cerámica.

-Como consecuencia, se puede evitar la necesidad de utilizar muchos sistemas de unión diferentes para diferentes aplicaciones y, por lo tanto, se reduce el desorden en el consultorio dental

### Características


- ◆ Funciona perfectamente en todas las condiciones orales (seco, húmedo)
- ◆ Un producto para diferentes tipos de aplicaciones.
- ◆ Un producto para diferentes técnicas de unión.
- ◆ Solo se debe aplicar una capa delgada
- ◆ Fuerza de unión alta y reproducible al esmalte y la dentina incluso bajo estrés extremo
- ◆ Excelente rendimiento también con compuestos de curado automático o doble cuando es posible el fotocurado
- ◆ Contiene MDP

### Beneficios

- ◆ Un enlace para todas las aplicaciones reduce el desorden en el consultorio dental y reduce el peligro de una aplicación incorrecta
- ◆ Aplicación segura y que ahorra tiempo, sin sensibilidad técnica
- ◆ Restauraciones duraderas.
- ◆ Conveniente sistema de una botella
- ◆ Se puede utilizar para unir materiales restauradores indirectos con superficies metálicas como óxido de circonio, óxido de aluminio, etc.


## Propiedades Físicas de Oxford Universal Bond

Autograbado Resistencia al cizallamiento después del termociclado

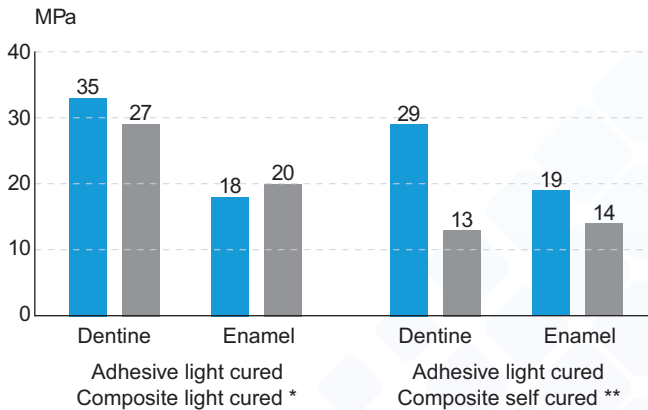

■ Oxford Universal Bond ■ Scotchbond Universal (3M ESPE)

Resistencia total al cizallamiento del ataque químico después del termociclado MPa

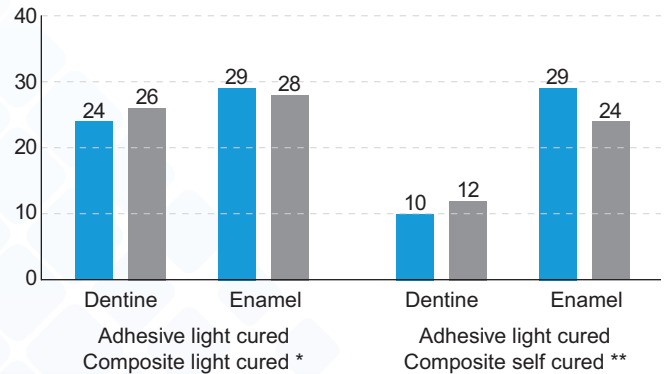

\* tested with Oxford Ceram Micro \*\* tested with Oxford FloCem

## Información para pedidos Oxford Universal Bond, adhesivo universal

### Número de pieza

21-005

21-007

### Artículo

Oxford Universal Bond – Bottle

Oxford Universal Bond – Single

1 x 5 ml

Dose on request

Error y omisiones excluidos. Los productos de Oxford Scientific solo deben ser utilizados por dentistas y para su uso previsto. Lea estas instrucciones de uso detenidamente.  
© Copyright First Scientific Dental Materials GmbH - Vers. 04.20\_EN

Space for you

 Oxford Scientific

Made in Germany by First Scientific Dental Materials GmbH